

## NEMOCNIČNÁ MASKA

### NEVENTILOVANÁ CELOTVÁROVÁ MASKA (NA JEDNO POUŽITIE)

Rýchle nasadenie, vysoká účinnosť

#### Na krátkodobé použitie v nemocnici, pre jedného pacienta

- Navrhnutá na neinvazívnu ventilačnú liečbu v nemocničnom prostredí.
- Vhodná na kritickú starostlivosť – účinná pri vysokých terapeutických tlakoch (max. 40 cm H<sub>2</sub>O).

#### Rýchle a jednoduché nasadenie a zloženie

- Praktické riešenie; maska pozostáva z jedného kusa, vopred zostavená náhlavná súprava.
- Rýchlokonektory – spony náhlavnej súpravy – pre rýchle a jednoduché nasadenie a zloženie masky.


#### Spoľahlivá kvalita a účinok

- Prémiová dvojmembránová technológia spoločnosti ResMed – v maske na jedno použitie.
- Vysoká kvalita – testované podľa prísnych noriem spoločnosti ResMed.

**Lahko dostupný tlakový a kyslíkový konektor**  
Pohodlné monitorovanie tlaku v maske  
a prívodu kyslíka

**Silikónová dvojmembránová výstelka**  
Stabilné a pohodlné utesnenie využívajúce  
prémiovú tesniacu technológiu  
spoločnosti ResMed

**360° otočné kolienko**  
Umožňuje opatrovateľovi  
alebo klinickému pracovníkovi  
nastaviť najlepšiu polohu hadičky

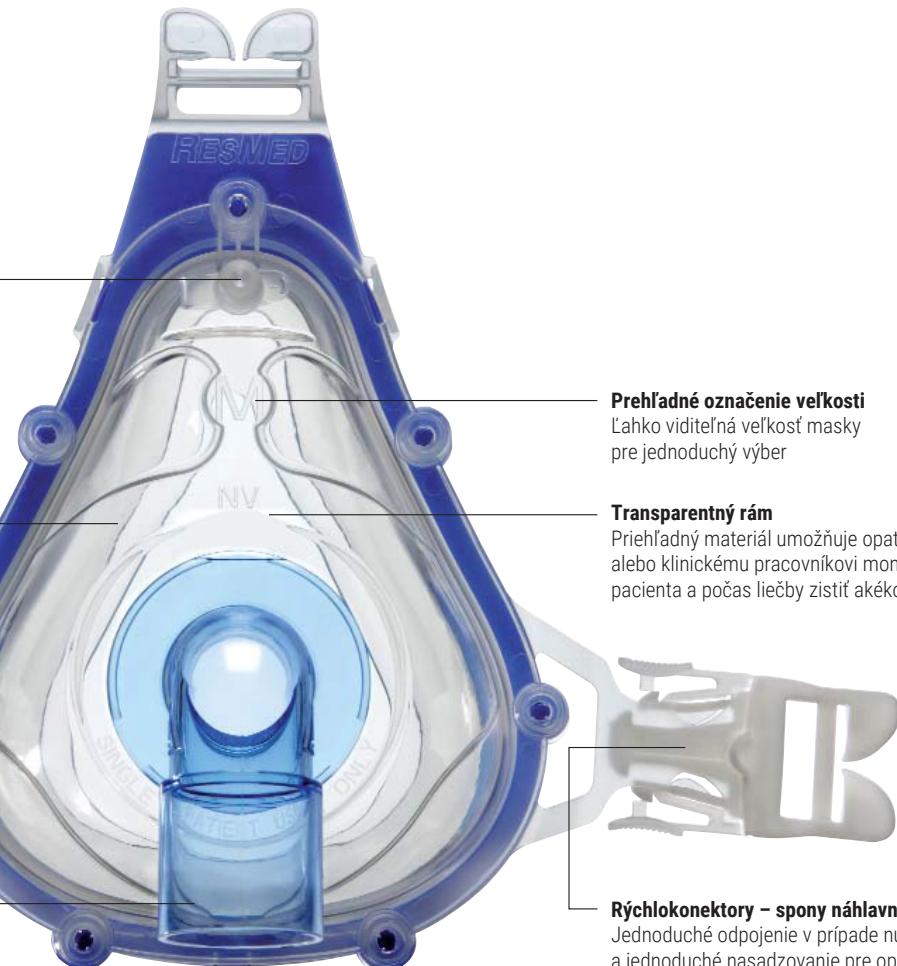


**Rýchlokonektory – spony náhlavnej súpravy**  
Jednoduché odpojenie v prípade núdze  
a jednoduché nasadzovanie pre opatrovateľa  
alebo klinického pracovníka, dokonca  
aj u ležiaceho pacienta

## HLAVNÉ TECHNOLOGICKÉ PRVKY

### Dvojmembránová tesniaca technológia v maske na jedno použitie

- Hrubá vnútorná membránna zabezpečuje podporu a stabilitu.
- Tenká vonkajšia membránna zvyšuje komfort pri kontakte s pokožkou.
- Spolu dve membrány dvojmembránovej konštrukcie zabezpečujú pohodlné, ale stabilné utesnenie.

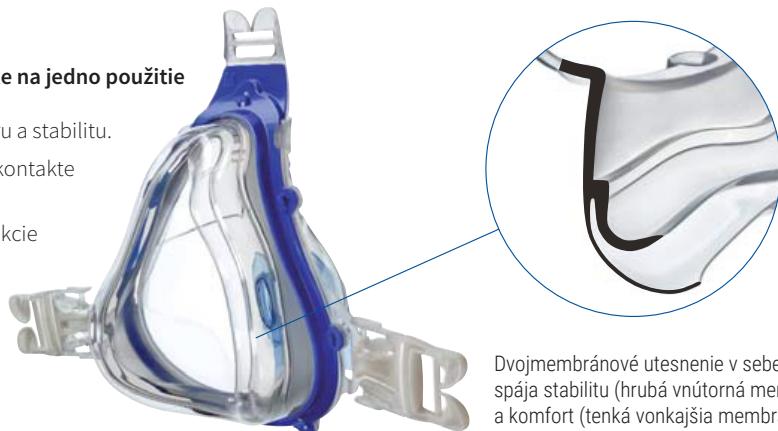

Dvojmembránové utesnenie v sebe spája stabilitu (hrubá vnútorná membránna) a komfort (tenká vonkajšia membránna)

## PRÍNOSY PRE OŠETROVATEĽOV

### Rýchle nasadenie

- Vopred zostavená maska s náhlavnou súpravou
- Konštrukcia vyžaduje minimálne úpravy
- Jednoduchá šablóna na výber veľkosti (na obale)

### Jednoduché použitie

- Rám masky z jedného kusa bez voľných častí
- Náhlavná súprava, ktorú stačí raz nastaviť a už len používať
- Rotačné kolienko umožňuje nastavenie polohy prívodnej hadičky v ktoromkoľvek smere

### Efektívne riadenie skladových zásob

- Na pokrytie širokej škály potrieb stačia tri veľkosti

### Efektívne riadenie liečby

- Optimálne utesnenie a minimálne úniky zabezpečujú efektívnu neinvazívnu ventiláciu
- Ľahko prístupný konektor na monitorovanie a manažment liečby

### Ideálne na urgentnú alebo kritickú starostlivosť

- Rýchlokonektory – spony náhlavnej súpravy šetria čas a podľa potreby umožňujú rýchle zloženie masky
- Účinné aj pri vysokých terapeutických tlakoch (max. 40 cm H<sub>2</sub>O)


## PRÍNOSY PRE PACIENTA

### Vyšší komfort

- Menší tlak na koreň nosa a menšie riziko podráždenia pokožky – dvojmembránové utesnenie je šetrné voči pokožke tváre
- Rovnomerné rozloženie tlaku na celej hlave – pohodlná konštrukcia náhlavnej súpravy

### Pohodlie

- Rýchlokonektory – spony náhlavnej súpravy umožňujú rýchle odpojenie masky od náhlavnej súpravy bez rušenia pacienta

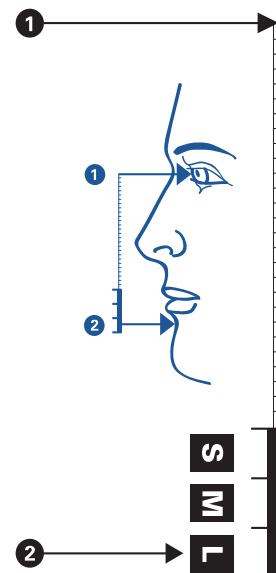

### Pohodlná, jednoducho nastaviteľná náhlavná súprava s troma remienkami:

jednoduché a rýchle nasadenie; rozdeľuje tlak rovnomerne na celú hlavu; materiály príjemné na pokožku zvyšujú komfort.

**Jednoduchý výber veľkosti bez otvorenia:** šablóna na výber veľkosti je súčasťou farebne odlišeného obalu.

**PRODUKTOVÉ KÓDY**  
**Nemocničná maska**  
**Neventilovaná celotárová maska na jedno použitie**

### ANZ, Ázia a Tichomorie

Malá	60735
Stredná	60736
Veľká	60737
Náhlavná súprava so sponami (10 ks)	60711